

● 무엇으로 검사하고 진단하시겠습니까?




●
열마디 설명을 한 장으로 대신합니다
이젠 환자의 질문에 대답하지 말고 보여주세요

Qray

치료와 환자를 이어주는 신뢰의 기술

Qray 란?

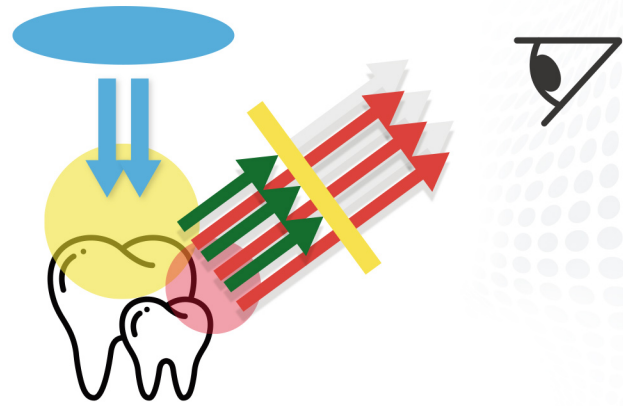

Qray 는 보여줍니다


Qray 는 푸른 가시광선(405nm)과 특수필터를 이용하여 치아의 바이오필름을 탐지하는 플러그 형광검사 체계입니다.

치아의 무기질이 소실된 부분은 가시광선을 흡수하지 못해 어둡게 나타나고 구강 내 바이오필름이 만들어내는 포피린 (porphyrin) 성분은 붉은색 형광으로 나타납니다.

이러한 원리로 치태, 치석, 초기 우식 등과 같은 케이스들이 큐레이를 통해 관찰됩니다.

큐레이의 진단기기는 임상적 타당성이 검증된 **정량광형광기법(Quantitative Light-induced Fluorescence(QLF™))**을 토대로 개발됩니다.


Qray 에 대해
"더 자세히 알고 싶다면?"

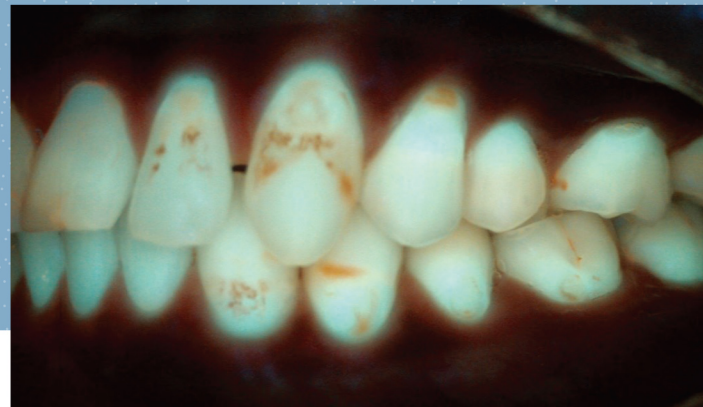

Surface caries



Plaque

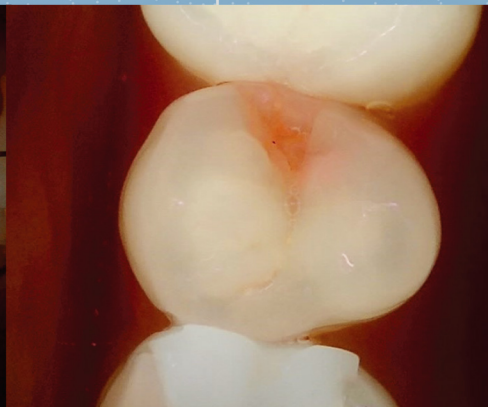

Proximal Caries



Crack



Prosthesis

Qray 는 믿을 수 있습니다



신의료기술 평가 완료

신의료기술평가위원회에서 시행하는 기술의 안정성과 유효성 및 임상적 유용성 평가에 합격하였습니다. 2018년 "정량광형광기를 이용한 치아우식증 검사"로 신의료기술 고시가 됨에 따라 향후 병원에서도 합법적 청구가 가능해졌습니다.



연구 활동 및 학술 논문

1993년 처음 기술이 개발된 이후로 다양한 연구들을 통해 Qray 기술과 장비를 활용한 검사법의 진단정확성과 유효성이 입증되고 있습니다. 국내외 40여 편의 학술 논문이 이를 뒷받침해 주고 있으며, 여러 연구기관과의 협업을 통한 연구가 지속되고 있습니다.



다수의 특허 보유

'미생물 활성을 발견하는 디스플레이 장치 및 이를 이용한 자가 평가 방법', '미생물 활성을 발견할 수 있는 휴대용 관측 장치 및 이를 이용한 자가 평가 방법' 등 기술과 제품에 대한 다수의 특허와 상표권을 보유하고 있습니다.

Qray cam pro



전면(상하악)을 촬영하여
구강상태의 전반적 점검을
실행합니다.

Qraypen C



개별 치아를 정밀하게
촬영하여 상태를 관찰하고
진행 경과를 관찰합니다.

Qrayview C



치료 중 구강 상태를 동시에
확인할 수 있는 기기로 치료의
정확성을 높입니다.

Qray m



Qscan plus



개인이 간단하게 치아 상태를
체크할 수 있는 휴대용 기기입니다.
셀프체크는 물론 상대방의 구강을
체크할 수 있습니다.

5단계 진료 체계

진료
프로토콜


Screening

Assessment


Diagnosis

Treatment



Maintenance

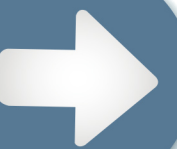

촬영
이미지

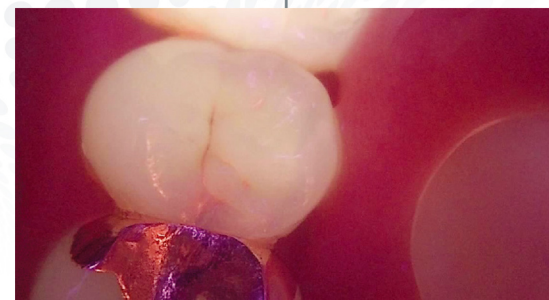

분석화면

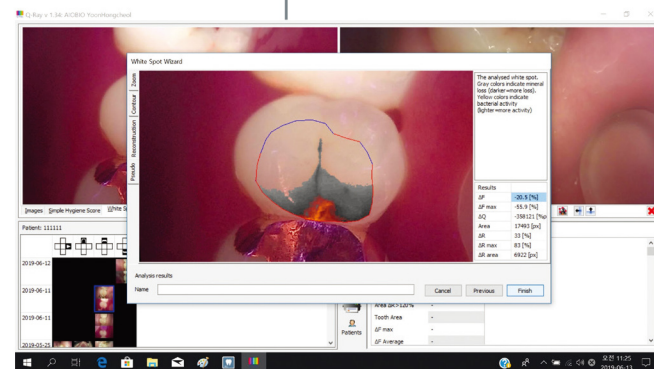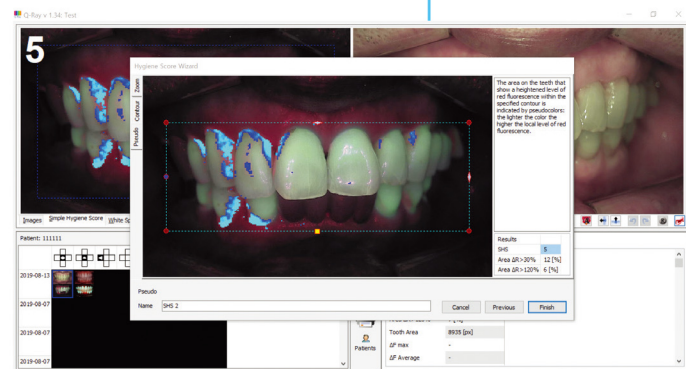

Qray 분석소프트웨어

Qray sw

법랑질 표면의 미네랄이 소실된 정도와
치아의 세균활성도를 정량화하여 수치로
나타내어 진단에 도움이 되는
프로그램입니다.



제품
사용 모습



진단분석기기



개인의 치태를 채취하여 구강 내 바이오필름의 산 생성정도를 측정합니다.
이를 정밀하게 분석하여 색과 점수로 충치 발생 위험도를 알려줍니다.



호흡을 측정하여 150초 내에 구취에 대한 분석 그래프를 제공합니다.
체계적 수치로 생리적 구취와 병리적 구취를 감별하고 진단할 수 있습니다.

아이오바이오 기능성 치약

계면활성제를 최소화하고 천연유래성분 함유량을 높였습니다.
각 치약의 특화된 기능으로 환자에게 맞춤 처방이 가능합니다.



P치약

추천 임플란트 환자/치주질환 환자/구취 환자

- | 천연 프로폴리스 함유
- | 식약처 인정 잇몸질환 예방성분 포함
- | 잇몸질환 특화 치약



W치약

추천 미백치료 환자/지각과민 환자

- | 나노칼슘하이드록시아파타이트 함유
- | 치아 재착색방지 / 미백유지효과
- | 상아세관 봉쇄



F치약

추천 초기충치 환자/교정 환자/소아 환자

- | 초기충치 진행을 막아주는 불화나트륨 995ppm 함유
- | 초기 우식 재광화
- | 치아우식 예방



내 손 안에 작은 치과

아이오바이오
휴대용 칫솔세트



구성 칫솔 1ea + 치약 1ea + 휴대용 케이스

| 치과 의사가 직접 고안한 기능성 칫솔과 미니 P치약(20g)으로 구성되어 있습니다. 간편하게 휴대하여 언제 어디서든 치아건강을 관리할 수 있습니다.

(주) 아이오바이오

서울시 강남구 테헤란로8길 16, 지희빌딩 9층

T. 02.561.5101

F. 02.3454.1403

E. aiobio@aiobio.co.kr



www.aiobio.co.kr



<https://blog.naver.com/thegray>



<https://www.facebook.com/AIOBIOOnGray>



<https://smartstore.naver.com/aiobio>



<http://www.aiobioshop.com/>